

## Termômetro Para Testa


### Monitor de Temperatura de Cristal Líquido

#### Os termômetros de cristal líquido para a testa fornecem temperaturas precisas de forma rápida e fácil.

Durante qualquer epidemia, a detecção prematura da febre além de ajudar a prevenir o alastramento da doença, também garante o tratamento mais rápido. Os termômetros para testa, utilizam tecnologia de cristal líquido, são aprovados pelo FDA e permitem monitorar a temperatura do corpo de uma forma simples, rápida e econômica.

Se recomenda que trabalhadores de serviços essenciais tenham a temperatura monitorada antes de entrarem nas instalações onde irão trabalhar.

- Adesivo de fixação
- Modelos Descartáveis ou reutilizáveis
- Feito nos Estados Unidos

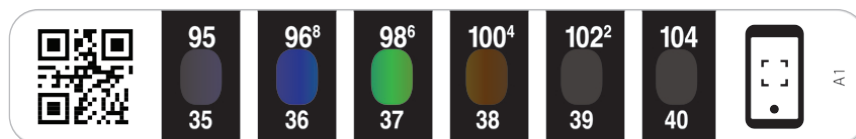


### Esteja Pronto Para o Inesperado

Os termômetros de testa são uma maneira rápida e precisa para monitorar a temperatura do corpo. Você obtém a temperatura precisa em apenas 15 segundos. Basta observar o display de cristal líquido até que a cor pare de mudar. E como você pode verificar a temperatura de forma não invasiva, os termômetros de Testa são ideais para utilizar em crianças, pacientes em Pós-operatório e pessoas em quarentena.


### Leitura de Temperatura Rápida e Precisa

Com a segurança de anos de pesquisas, tecnologia de produção e projetados para ter longa vida de prateleira; os termômetros de testa são uma Ferramenta essencial durante epidemias.

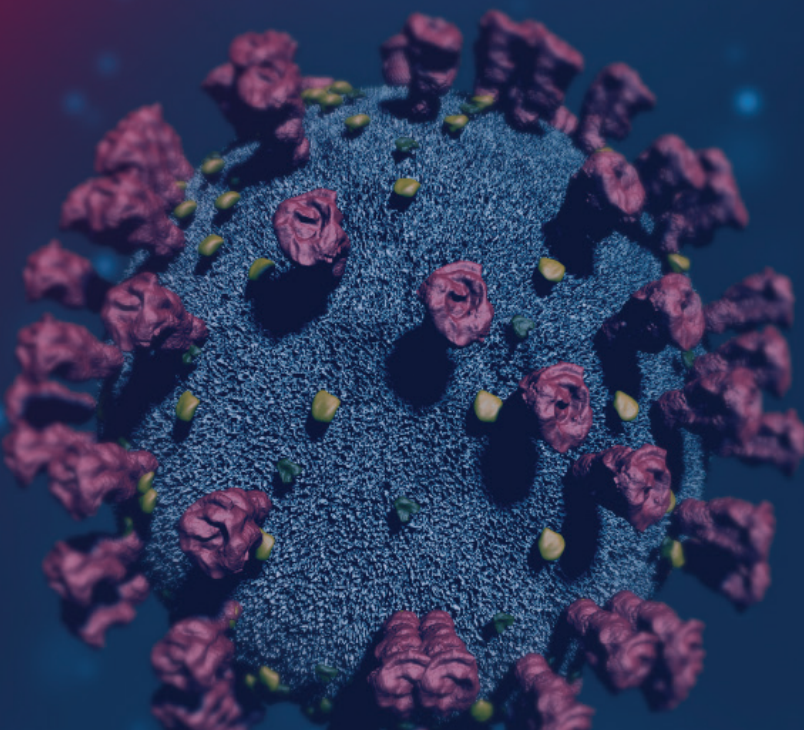

## Termômetro Para Testa

### Dimensões

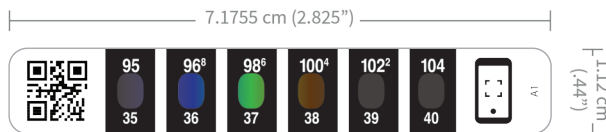

#### C-8720 - Termômetro de Testa oC e oF


**Faixa de Temperatura:** 35°C/95°F, 36°C/96°F, 37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

**Dimensões:** 7.17 cm x 1.44 cm

**Aplicação:** Reutilizável, adesivo

**Instruções de uso:** No QR code

### Especificações

<b>Modelos</b>	Dupla Escala- Fahrenheit e Celsius Sem adesivo ou com adesivo antialérgico Descartável ou reutilizável
<b>Escala</b>	35°C a 40°C
<b>Precisão</b>	+/- 1°C
<b>Classificação</b>	Dispositivo Médico Classe 2 (FDA) Dispositivo Médico Classe I EU 2017/745 ISO9001:2015 
<b>Vida de Prateleira</b>	2 anos
<b>Fixação</b>	Adesivo descartável ou não adesivo reutilizável
<b>Embalagem</b>	Vendido em pacotes de 100 unidades ou Rolos com 5000 unidades

### Instruções de Uso

Os termômetros devem ser usados em ambientes fechados e em temperatura ambiente (aproximadamente 20°C - 30°C). Evite a luz solar direta ou o calor forte ao tirar a temperatura. Não tome temperatura se o indivíduo tiver comido, bebido ou se exercitado nos últimos 30 minutos devido à possibilidade de flutuação de temperatura.

1. Remova a película traseira.
2. Prenda o termômetro na testa pressionando as duas extremidades e aguarda aproximadamente 15 segundos.
3. Leia o termômetro enquanto estiver na testa – Verde: Temperatura Exata
  - Azul ou Marrom indicam variação de 0.5 grau
  - Azul: Adicione 0.5°C / Marrom: subtraia 0.5°C

